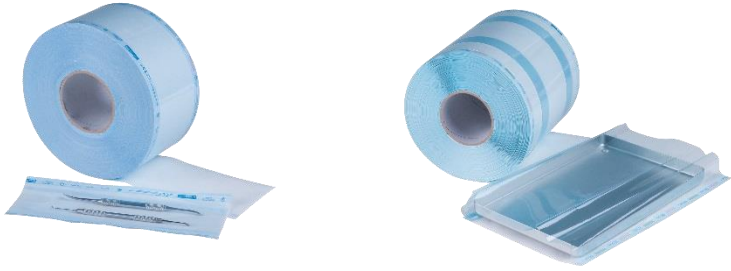


Désignation	GAINES DE STERILISATION						
Référence(s)	5 cm	7,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	20 cm avec soufflet de 5,5 cm
	3134962	3134963	3134964	3134965	3134966	3134967	3134968
Visuel							
Description	Gaines de stérilisation en rouleau de 200 m, disponibles en 6 largeurs + une taille à soufflet (rouleau de 100 m).						
Caractéristiques & Données techniques	<p>Papier Médical : 60 grammes PET Film : 12/30 de couleur bleue (12/40 pour la gaine à soufflet)</p> <p>Chaque rouleau est emballé individuellement sous film plastique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermeture du sachet : 170°C-200°C ▪ Stérilisation à la vapeur <ul style="list-style-type: none"> ○ 121°C à 134°C ○ Indicateurs virent du rose au marron ▪ Stérilisation à l'oxyde d'éthylène <ul style="list-style-type: none"> ○ 30°C à 54°C ○ Indicateurs virent du vert au jaune <p>Conformes aux normes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 868:5 - ISO 11607 : 1-2 - ISO 1140-1 						
Stockage	CONSERVER AU SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ						
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication						
Informations légales	Dispositif médical de classe I Marquage CE. Fabricant : E-LINE						